




Advance


Presoterapia

La presoterapia es una técnica no invasiva que utiliza una presión positiva de aire ascendente y alternante para realizar un drenaje linfático.


El equipo Apex Advance se suministra con manguitos especiales que recubren piernas y brazos por completo. Los manguitos se adaptan perfectamente al paciente. Incorpora tres vías para hacer un drenaje linfático progresivo. Se puede ajustar el equipo a ocho niveles de confort.

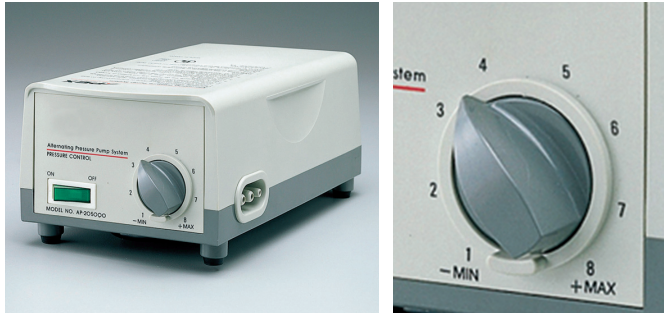

Advance: Ajustable en 8 niveles

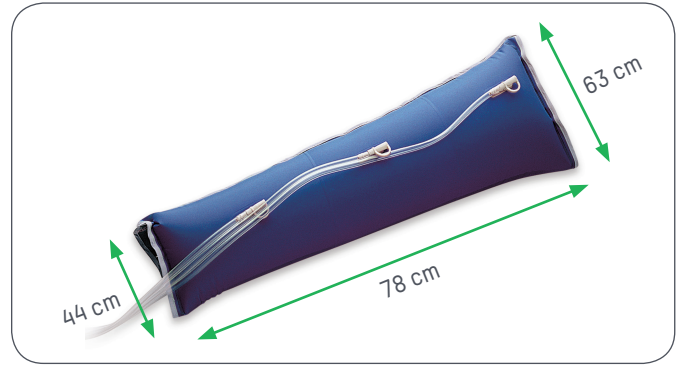

Manguito Brazo Advance

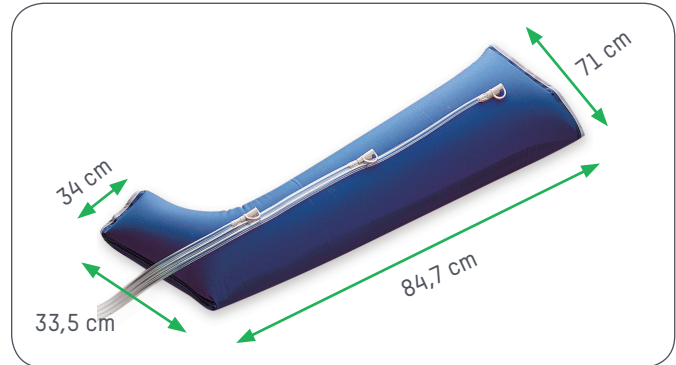

Manguito Pierna Advance

Descripción de producto	Compresor Advance	Manguito Brazo	Manguito Pierna
Referencia	0105022	0104023	0104024

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	14,2 x 12,7 x 29,7 cm. 1,94 kg	1,5 kg	1 kg
--	--------------------------------	--------	------

Especificaciones de producto	Compresor Advance	Manguito Brazo	Manguito Pierna
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	24 x 13 x 10 cm. 1,5 kg	78 x 64 cm. 70 gr	83 x 70/31,5 cm. 940 gr
Potencia	230V, 50Hz		
Presión	30 – 80 mmHg		
Salida de aire	5 litros/min		
Duración del ciclo	3/6 min		
Vías de entrada/salida	3	3	3
Niveles de presión	8 (ajustable)		
Material	ABS retardante al fuego	Nylon PU	Nylon PU
Garantía	2 años	6 meses	6 meses