

# PRESSCARE G300M

## PRESOTERAPIA | 2 SALIDAS - 3 PROGRAMAS DE INFLACIÓN

DISPOSITIVO INDICADO PARA: DRENAJE LINFÁTICO, LINFEDEMA, EDEMA DE INMOVILIDAD, TRATAMIENTO POST MASTECTOMIA, HEMATOMA, VASCULARIZACIÓN, DRENAJE, CELULITIS, RETENCIÓN DE LIQUIDOS, PIERNAS HINCHADA, RELAJACIÓN, PREVENCIÓN DE CALAMVRES, ETC. TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE SIMULTÁNEAMENTE CON TRES ACCESORIOS DIFERENTES. SE RECOMIENDA CPNSULTAR A SU MÉDICO ANTES DE USAR.

### TECHNICAL FEATURES

<b>Salidas</b>	2
<b>Programas</b>	3
<b>Presión</b>	0-180mmHg $\pm$ 10%
<b>Temporizador</b>	hasta 99 min
<b>Alimentación Red</b>	230V AC, 50Hz
<b>Tamaño</b>	mm 185x180x230
<b>Peso</b>	gr 3000

### DOTACIÓN




- De acuerdo con la configuración deseada
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo

### OPCIÓN DE COMPRA

	FUNDA DE PIERNA	FUNDA DE BRAZO	BANDA ABDOMINAL	CABLE DIVISOR
· PRESSCARE G300M-1	1	/	/	/
· PRESSCARE G300M-2	2	/	/	/
· PRESSCARE G300M-3	2	/	1	1
· PRESSCARE G300M-1B	/	1	/	/



CE  
0598

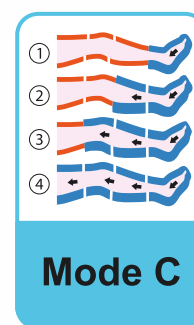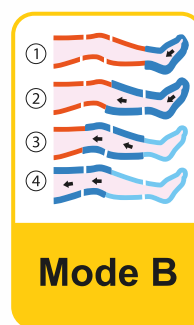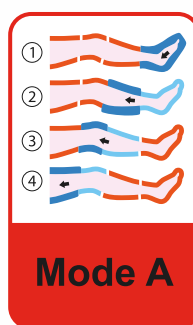

**MODE A:** la secuencia del programa infla y desinfla las cámaras de la pierna de una en una, empezando en la zona más baja (pie o mano) y llegando hasta la zona mas alta.

**MODE B:** la secuencia del programa infla dos cámaras a la vez, simulando la función de un masaje manual.


**MODE C:** la secuencia del programa ejerce la presión empezando por los pies y manteniendo infladas las cámaras hasta inflar la toda la pierna (o brazo o abdomen) hasta la ingle.

# PRESSCARE G300M


PRESOTERAPIA | 2 SALIDAS - 3 PROGRAMAS DE INFLACIÓN

TAMAÑO DE ACCESORIOS (4 SECCIONES)


FUNDA DE PIERNA TAMAÑOS "S" (A x B)	(A) mm 745 x (B) mm 310
-------------------------------------	-------------------------

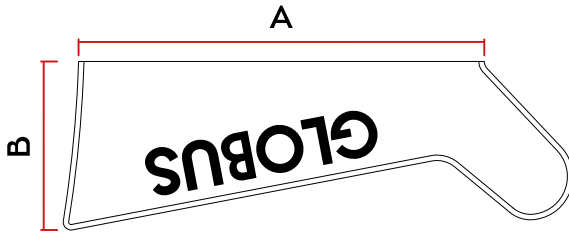


FUNDA DE PIERNA TAMAÑOS "M" (A x B)	(A) mm 880 x (B) mm 352
-------------------------------------	-------------------------

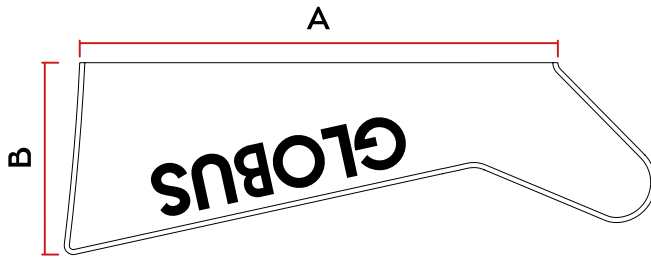


* FUNDA DE PIERNA TAMAÑOS "L" (A x B)	(A) mm 980 x (B) mm 380
---------------------------------------	-------------------------

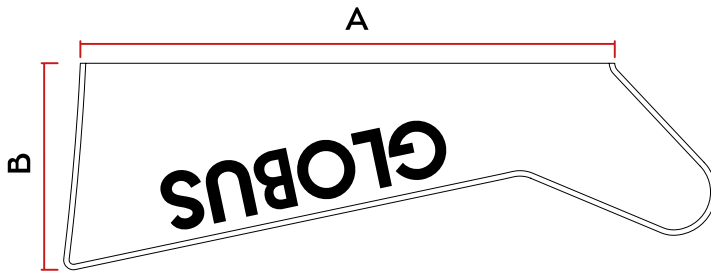

* BANDA ABDOMINAL (A x B)	(A) mm 1330 x (B) mm 380
---------------------------	--------------------------

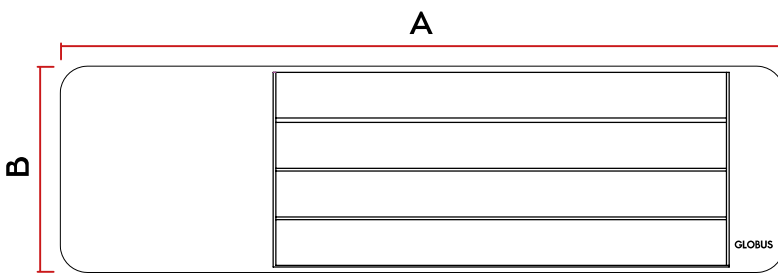

* FUNDA DE BRAZO (A x B)	(A) mm 440 x (B) mm 1287
--------------------------	--------------------------

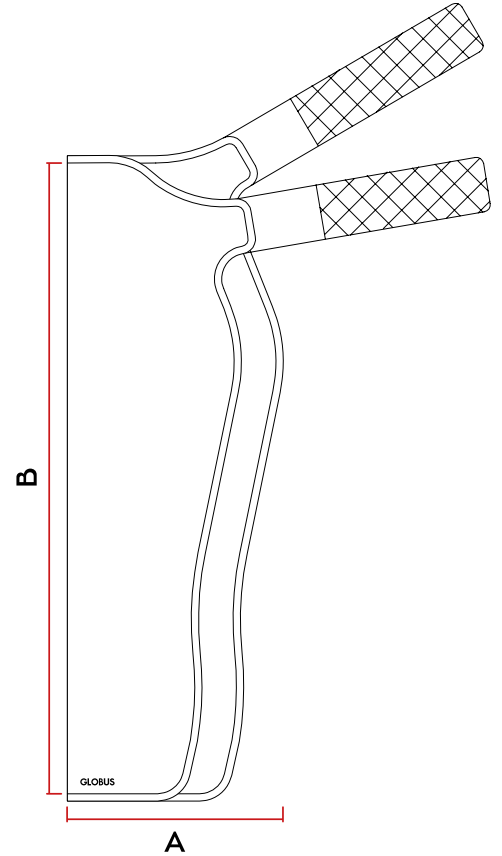

CABLE DIVISOR para utilizar tres accesorios al mismo tiempo  
 CABLE SOLO

Los accesorios, de acuerdo con las diferentes configuraciones, pueden estar incluidos o disponibles a pedido.

* FUNDA DE BRAZO EXTENSIÓN	ancho mm 100
* FUNDA DE PIERNA	ancho mm 100

\* Accesorio opcional disponible a pedido